


LifeMobile

- È un'applicazione che consente alle Associazioni e Strutture Asl di gestire le missioni assegnate dalla Centrale Operativa con dispositivi smartphone.
- Permette la trasmissione alla Centrale Operativa dei dati registrati durante lo svolgimento della stessa evitando la comunicazione via Radio e via Telefono.
- Nella schermata di apertura di LifeMobile, l'applicazione si collega al server della Centrale Operativa per verificare che lo smartphone sia effettivamente abilitato.

OPERAZIONI DA EFFETTUARE

1) Selezione del mezzo

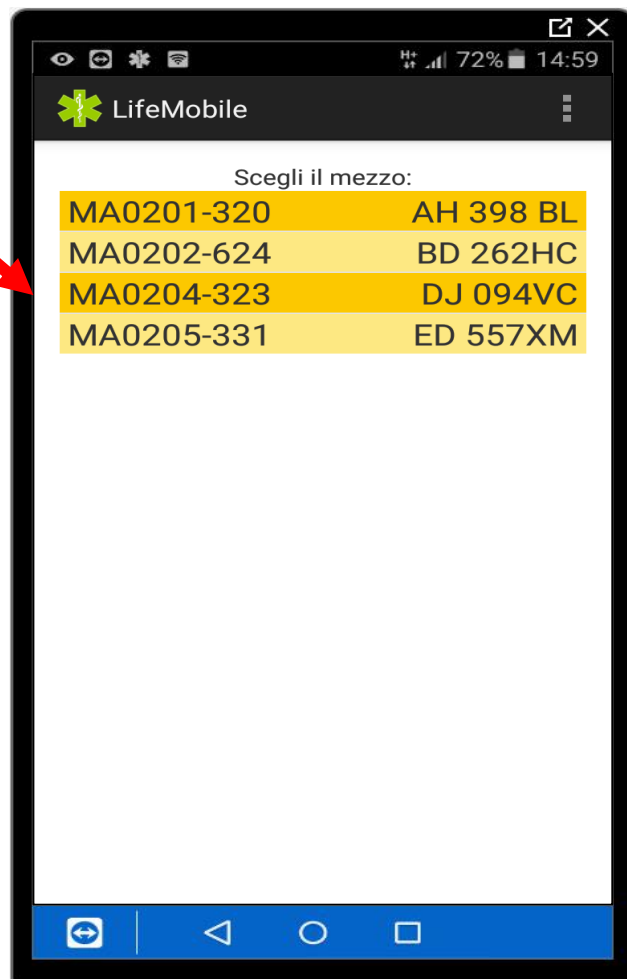

Le elenco è configurabile dalla Centrale Operativa o dalle Associazioni direttamente da WebSer.


È importante **NON selezionare contemporaneamente lo stesso mezzo dell'Associazione su più LifeMobile attivi**, che richiederà conferma della scelta con un messaggio specifico:

Confermi la selezione del mezzo?



2) Confermata la scelta si presenterà la schermata ***In Attesa di Nuove Missioni*** mostrandoci, il posizionamento sulla cartografia Google Maps©.

Sotto la cartografia verranno mostrate le informazioni riguardanti la ***Sigla mezzo***, la relativa ***Targa***, lo stato dell'***ultimo contatto*** indicatoci dall'icona; se **verde positivo**, se **rossa negativo**

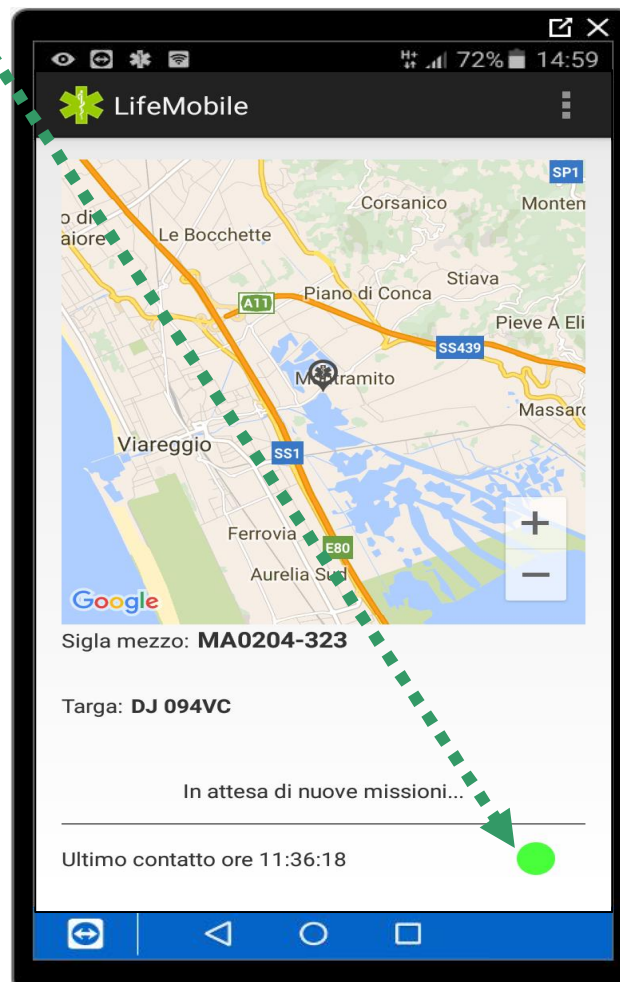

3) AVVIO MISSIONE

Nel momento in cui si invia una missione al mezzo dell'Associazione questa lo riceve sullo smartphone, passando dallo stato ***In attesa di nuove missioni*** allo stato ***Nuova missione*** attivando la schermata con

SIRENA ROSSA e AVVISO SONORO DI ALLARME.

Premendo sulla sirena sarà possibile visualizzare i dettagli del servizio.



Apparirà ora una schermata riepilogativa dove, in Alto e al Centro, verranno visualizzati i dati del servizio. In Basso compariranno i tasti funzione:

- ” In Alto:
- ” ID Missione
- ” Data

OBIETTIVO
L'indirizzo dell'obiettivo con eventuali Note utili per il suo raggiungimento.

DISPATCH
Informazioni riguardanti l'intervista dell'operatore del 118


NOTE
Eventuali note relative alla singola missione inserite dall'operatore e di Centrale durante la registrazione della stessa.

In Basso saranno visualizzati i tasti funzione. Questi cambieranno sulla base dell'avanzamento della missione consentendo la registrazione dei tempi

- ” **Avvia con navigazione**
- ” **Avvia senza navigazione**

4) MISSIONE ACCETTATA


Si procede all'avvio con o senza navigazione. Verrà richiesto l'**Inserimento dei KM di partenza** del mezzo o la conferma di quelli eventualmente suggeriti.

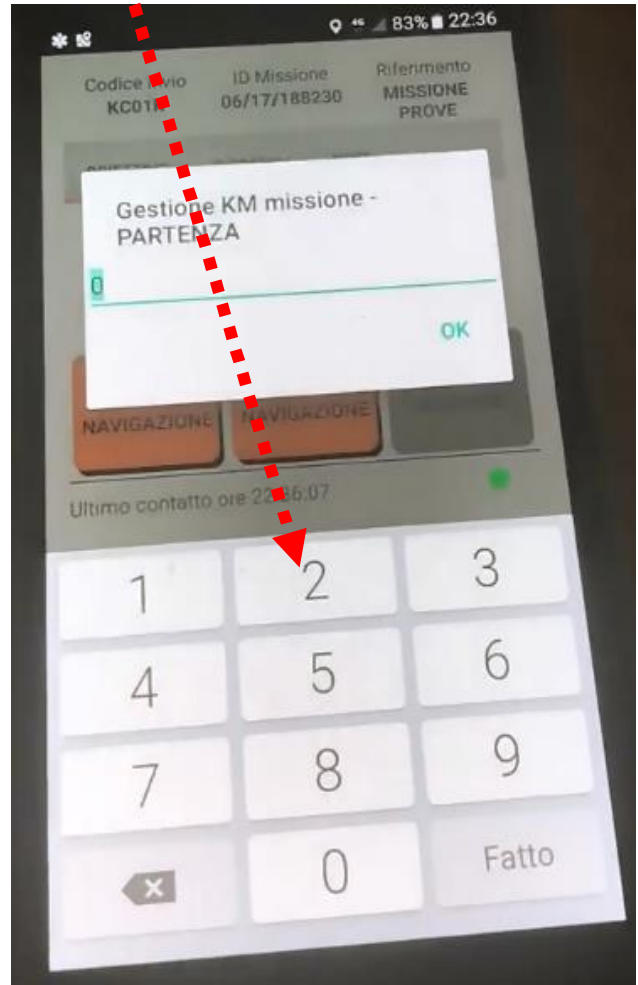

5) PREMUTO IL **tasto 'Avvia con navigazione'**

si presenterà la schermata con cartografia dove verranno visualizzati obiettivo della missione, identificati da **marker rossi**.

La **destinazione della missione** viene invece identificata da un **marker verde**.

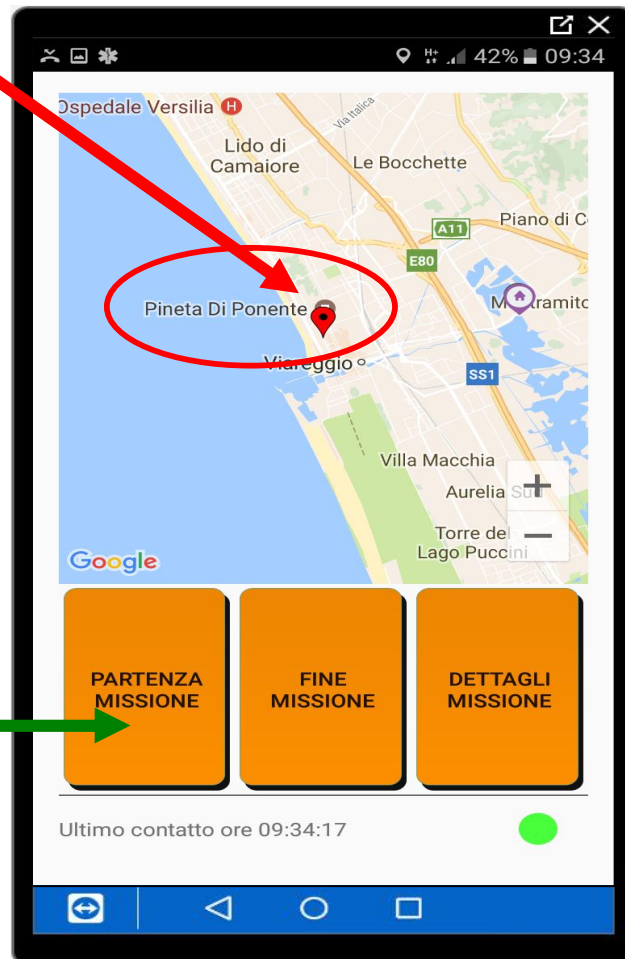


6) **PARTENZA MISSIONE**


A questo punto per partire effettivamente in missione dovremo

premere sul pulsante 'Partenza missione'

Si avvierà così la navigazione verso l'obiettivo registrando il primo tempo di missione.

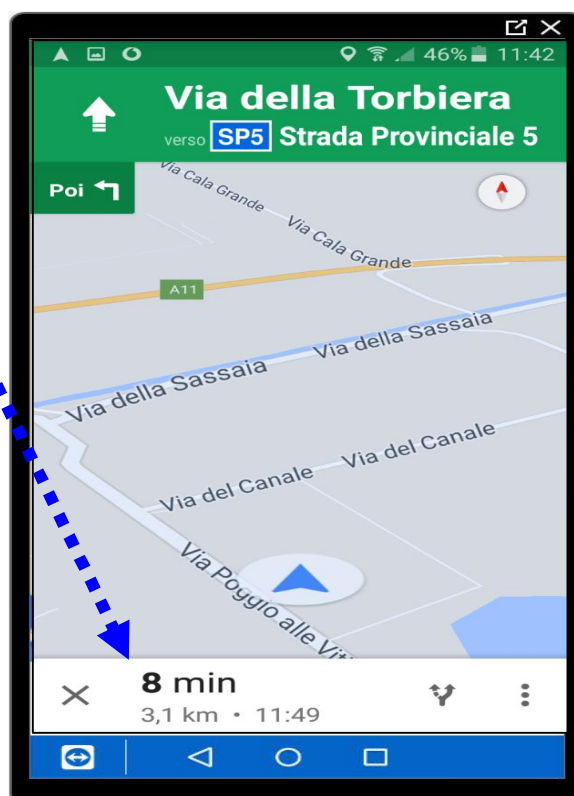

7) raggiunto il target della missione verrà premuto il tasto **Arrivo su obiettivo**

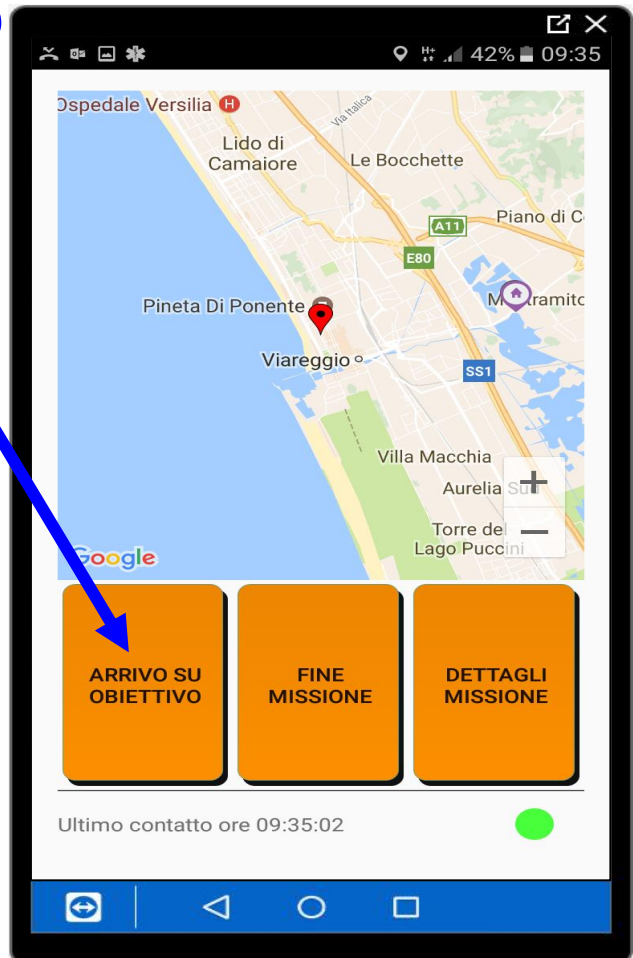

8) Nel passaggio successivo, oltre alla visualizzazione del tasto

Partenza da obiettivo

si presenterà la schermata contenente i campi valorizzabili con menù a tendina relativi a

- **Dinamica Riscontrata**
- **Esito trattamento**
- **Classe patologia**
- **Patologia riscontrata**
- **Valutazione del paziente**
- **Manovre eseguite**



Questi campi dovranno essere compilati entro
Invio del Fine Missione



AVREMO LA APERTURA DI MENU DA TENDINA

CAMPI OBBLIGATORI PRIMA DELLA PARTENZA DA OBIETTIVO





SCEGLIERE I CAMPI SCORRENDO IL MENU VERSO L'ALTO O IL BASSO

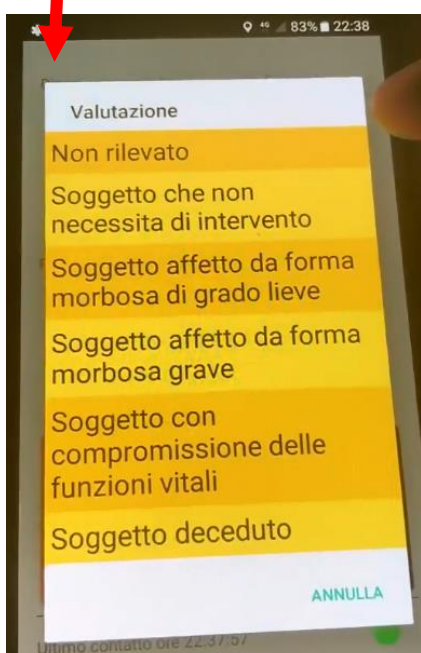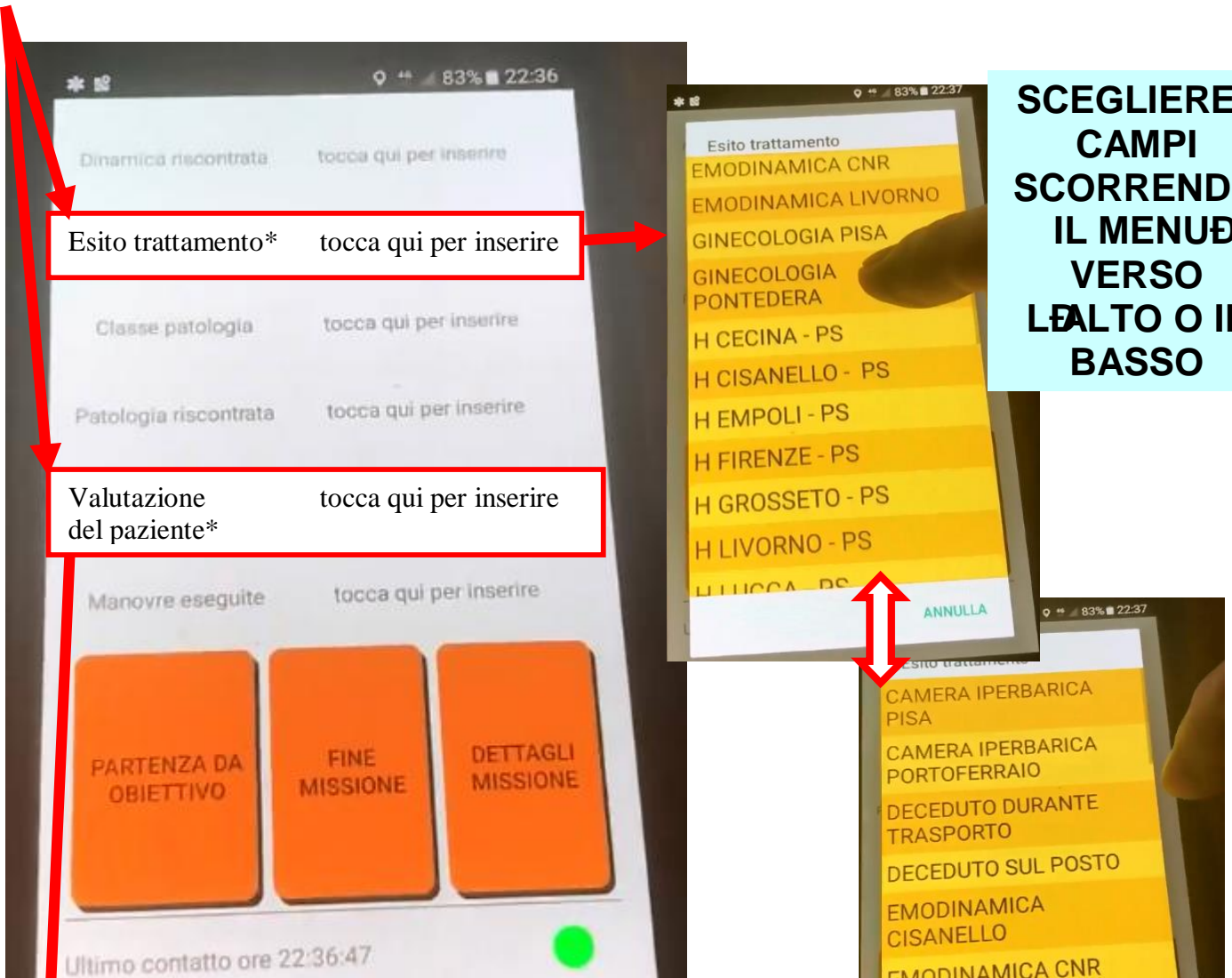

In particolare prima di premere su 'Partenza da obiettivo' è comunque obbligatorio selezionare 'Esito trattamento' e 'Valutazione del paziente'. Gli altri dati, anch'essi obbligatori, possono però essere inseriti prima di chiudere la missione premendo su 'Fine Missione'.

I **campi obbligatori** prima della **Partenza da obiettivo** sono contraddistinti da un **asterisco**. Una volta inserite almeno queste due informazioni sarà quindi possibile dirigersi verso la destinazione. Quindi, raggiunta questa, verrà premuto il relativo pulsante **Arrivo a destinazione**


LE ALTRE SCELTE DA INSERIRE SCORRENDO IL MENU A TENDINA SI POSSONO INSERIRE IN UN SECONDO MOMENTO PRIMA DI PREMERE IL TASTO FINE MISSIONE, PREMENDO SULLA VOCE PRESCELTA DI COLORE GIALLO O ARANCIO (ma è sempre consigliabile inserirli prima della partenza da OBIETTIVO)

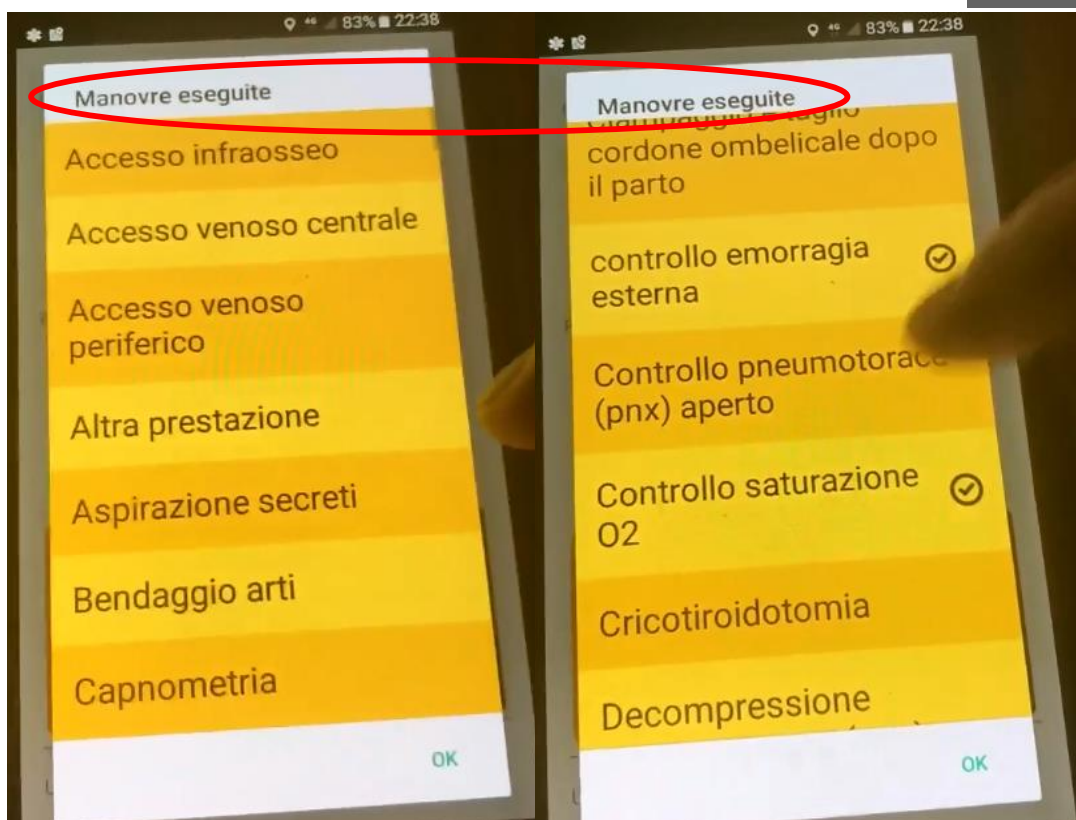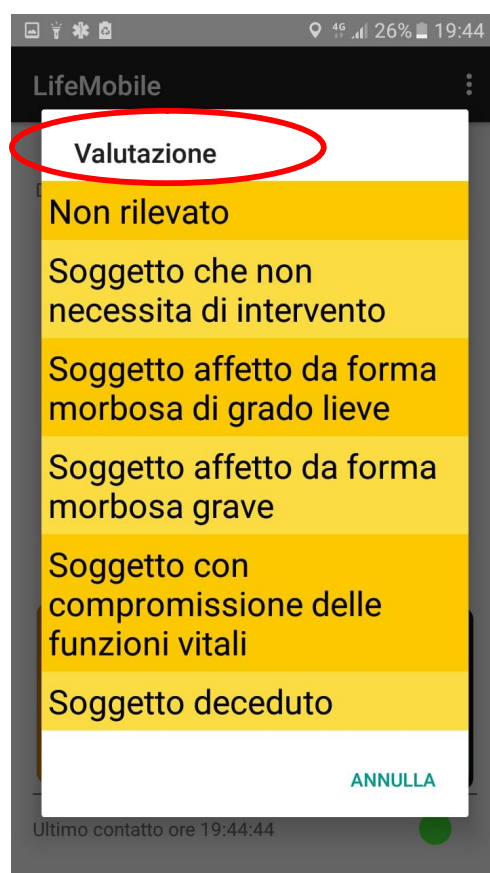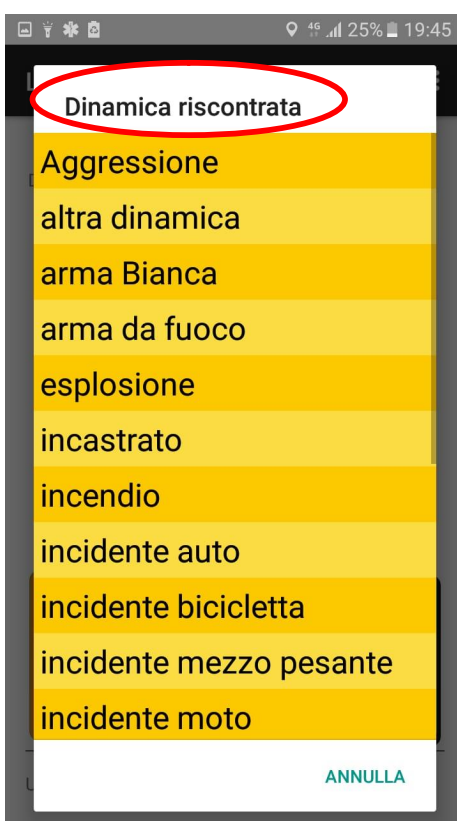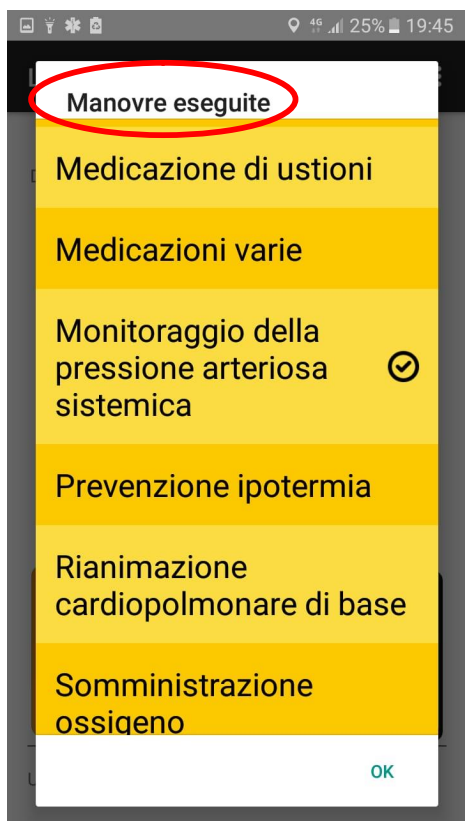

9) ARRIVO IN PS

Verrà premuto il pulsante

ARRIVO A DESTINAZIONE

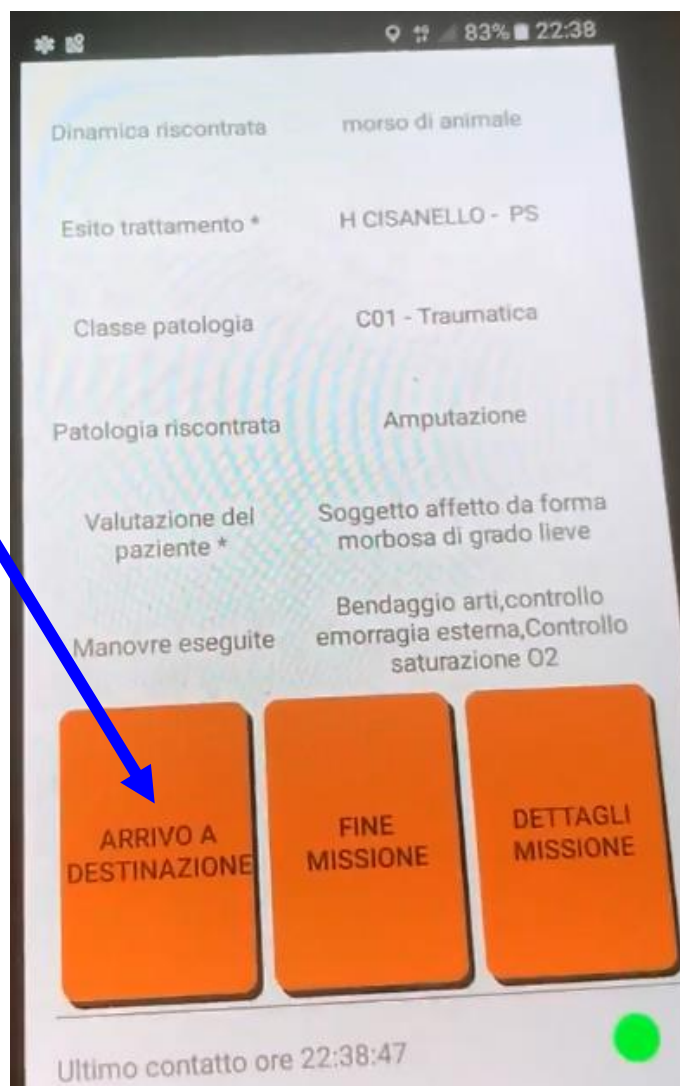

10) FINE MISSIONE

All'uscita dal PS, consegnato il paziente, verrà premuto il pulsante **FINE MISSIONE**




11) ERRORE

Se però i dati obbligatori non sono stati compilati, alla pressione del **Fine missione** apparirà un messaggio:

Errore
Non hai compilato correttamente i campi

Una volta compilati questi sarà possibile procedere.

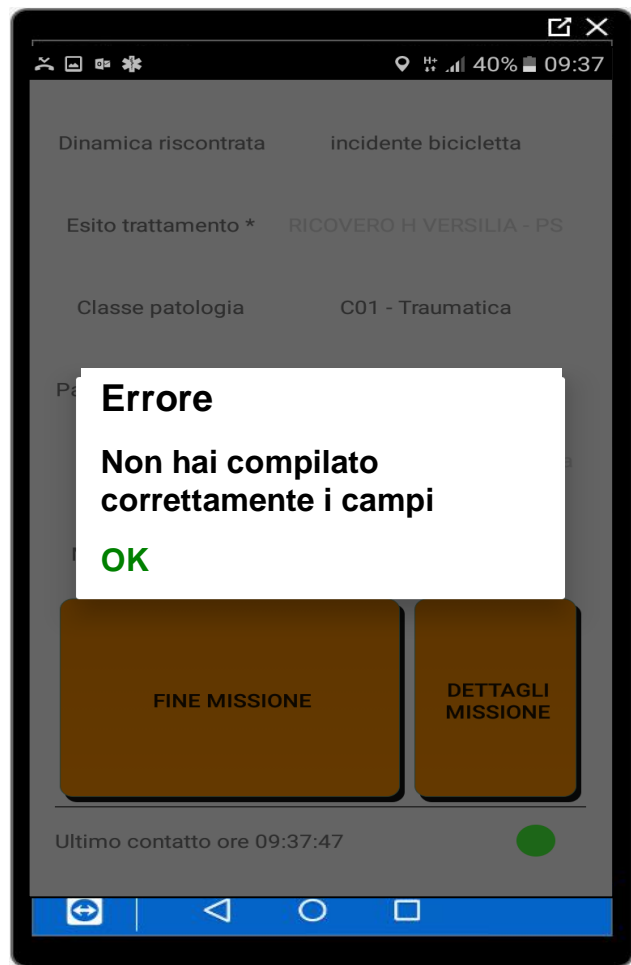

12) RIENTRO IN SEDE

Dopo la pressione del pulsante

Fine Missione

la schermata contenente i dati compilati sparirà per lasciare spazio alla cartografia di Google.

Sarà visibile anche l'ultimo tasto funzione per la missione in corso ovvero


Rientro in sede


che consentirà la registrazione dell'effettivo rientro




13) KM PERCORSI

Successivamente alla pressione del pulsante **Rientro in sede** l'applicazione richiederà l'inserimento dei **Km di fine servizio.**

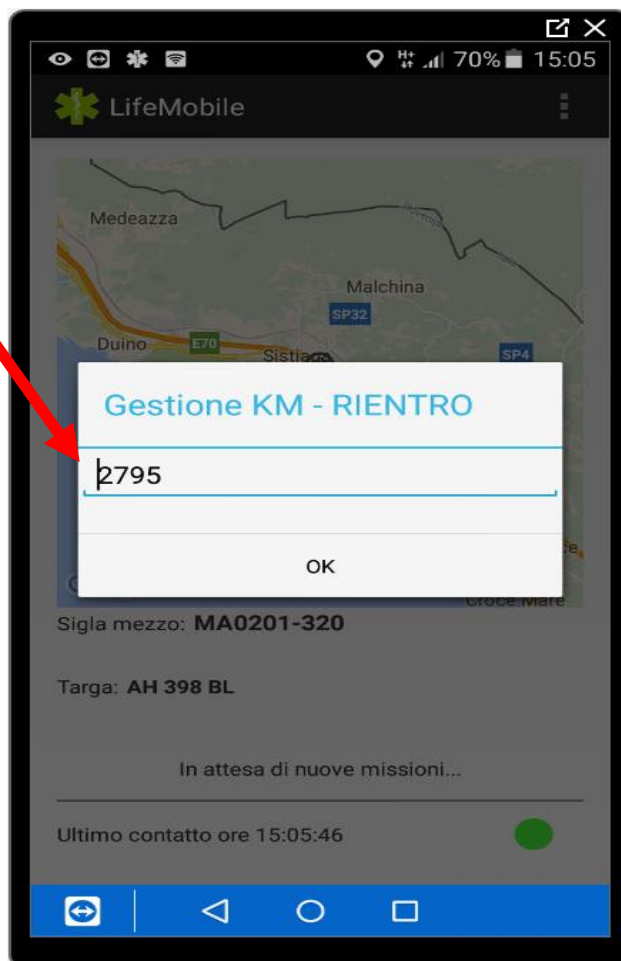

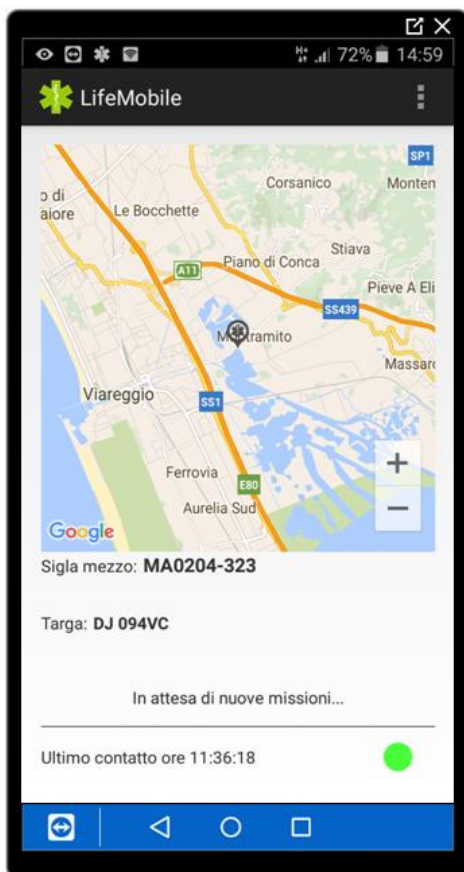

Dopo aver immesso i Km di rientro **LifeMobile** tornerà allo stato iniziale ovvero 'In attesa di nuove missioni' rendendo il mezzo disponibile per eventuali altre missioni.

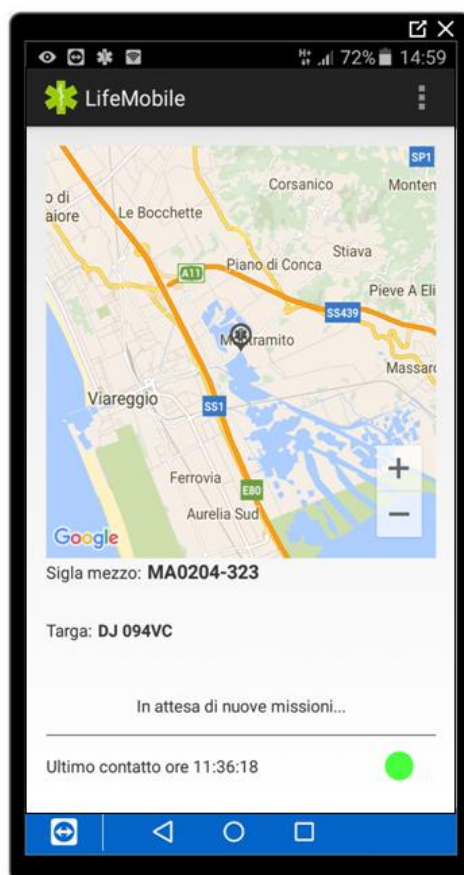

Qualora occorra cambiare mezzo, prima di rendersi disponibili per ulteriori missioni, sarà necessario uscire dall'applicazione e riaprirla per selezionare il mezzo desiderato tra quelli disponibili.

Fine